

ENDO CLEAN 2000

MÁY VỆ SINH KHỬ KHUẨN

ỐNG SOI MỀM TỰ ĐỘNG



TỔNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VỆ SINH KHỬ KHUẨN ỐNG SOI!

MÁY VỆ SINH KHỬ KHUẨN HAI ỐNG SOI ĐỒNG THỜI CHO HIỆU QUẢ CAO

- Endo Clean 2000, thiết kế 03 kênh vòi phun mạnh mẽ, có khả năng rửa 02 ống soi nhanh chóng, hiệu quả và ngăn chặn sự pha loãng dung dịch khử khuẩn bằng cách loại bỏ hầu hết hơi ẩm trên bề mặt ống soi và các lỗ với chức năng phun khí mạnh mẽ, lần đầu tiên ở Hàn Quốc
- Cài đặt thời gian và cấu hình chương trình giúp máy hoạt động dưới điều kiện tốt nhất
- Số lượng ống soi có khả năng khử khuẩn đồng thời là 2 đối với tất cả các loại ống soi và những ống soi đặc biệt
- Máy cung cấp dịch vụ xử lý ống soi tốt nhất với việc trang bị bộ lọc nước vào và bộ lọc dung dịch khử khuẩn



ENDO CLEAN 2000



- Cài đặt cảnh báo thời gian sử dụng dung dịch khử khuẩn theo đặc tính hóa chất
- Cài đặt nhiều chương trình người dùng
- Chức năng vệ sinh bình khử khuẩn
- Cài đặt cảnh báo tự động mở cửa
- Sử dụng vật liệu kháng hóa chất acid peracetic và PAA
- Tự động bơm cồn vào các kênh ống soi

Vòi phun 3 kênh xoay 360⁰ mạnh mẽ

[Bề mặt bên ngoài ống soi và các kênh trong ống soi]

Vệ sinh đồng thời 02 ống soi [Thời gian vệ sinh nhanh]



Làm khô bồn ngâm và ống soi nhanh chóng bằng trang bị phun khí mạnh mẽ



Ngăn chặn vật thể bên ngoài vào trong ống soi bằng bộ lọc



Ngăn chặn sự tràn ngập bồn ngâm bằng bộ 02 cảm biến



Trang bị súng hơi mạnh mẽ

[Làm khô bề mặt và các kênh ống soi nhanh chóng] [Chống nghẹt vòi phun khí nước]



Trang bị bộ lọc


[Luôn cung cấp chất lượng nước sạch]

Cung cấp đầu kiểm tra rò rỉ

OLYMPUS, PENTAX, FUJINON



Quy trình tự động

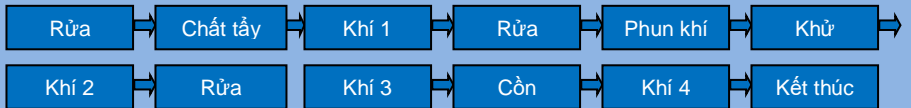

Ứng dụng	Ống soi mềm
Kiểm tra rò rỉ	Phát hiện bóng khí nhúng ống soi vào trong nước
Số lượng ống soi vệ sinh	02 ống soi đồng thời
Phương pháp vệ sinh bằng chất tẩy rửa	
Bề mặt bên ngoài	Hệ thống nhiều kênh bơm xoay 360 ⁰
Kênh bên trong	Bơm dung dịch vào trong kênh
Phụ kiện	Bơm dung dịch vào bên trong
Phương pháp khử khuẩn	
Bề mặt bên ngoài	Nhúng vào dung dịch khử khuẩn
Kênh bên trong	Bơm dung dịch khử khuẩn
Phụ kiện	Nhúng vào dung dịch khử khuẩn
Phương pháp phun khí	
Bề mặt bên ngoài	Hệ thống nhiều kênh bơm xoay 360 ⁰
Kênh bên trong	Bơm khí áp lực
Thời gian rửa nước (1, 2, 3)	10 giây-3 phút (0 giây-bỏ qua)
Thời gian vệ sinh chất tẩy rửa	5 giây (0 giây-bỏ qua)
Thời gian khử khuẩn	1 phút-1 giờ
Thời gian bơm cồn	5 giây (0 giây-bỏ qua)
Thời gian khí (1, 2, 3)	10 giây-30 giây (0 giây-bỏ qua)
Thời gian phun khí	10 giây-30 giây (0 giây-bỏ qua)
Cài đặt nhiệt độ bình chất khử khuẩn (Bộ tăng nhiệt bên trong)	15 ⁰ C – 50 ⁰ C
Lọc nước	Bên trong (tiền lọc)
Lọc chất khử khuẩn	Bên trong (tiền lọc)
Dung tích bình chứa	Khử khuẩn 18L, Chất tẩy rửa 1L, Cồn 1L
Kích thước (mm)	630(Ngang) x 700 (Rộng) x 980 (Cao)
Trọng lượng	90Kg
Nguồn điện	220-240VAC 50-60Hz

